

BENUTZERHANDBUCH

Bettisch

Produktcode: TableTIM



1. Eigenschaften

Der Bettisch verfügt über einen C-förmigen Metallrahmen und eine Tischplatte in Holzoptik. Er ist mit einer verstellbaren Tischplatte und bremsbaren Rollen ausgestattet, sodass er leicht bewegt und über dem Bett positioniert werden kann.

Bestandteile des Tisches:


- A. Rahmen
- B. Fußgestell mit Rollen
- C. Tischplattenrahmen
- D. Befestigungsschraube
- E. Tischplatte
- F. Höhenverstellung



2. Anwendung

Der Bettisch ist für die Verwendung direkt über dem Bett des Patienten vorgesehen und bietet im Bett eine Fläche zum Essen, Lesen oder Schreiben. Das Produkt ist sowohl für die Pflege in medizinischen Einrichtungen als auch zu Hause bestimmt.

3. Montage und Einstellung

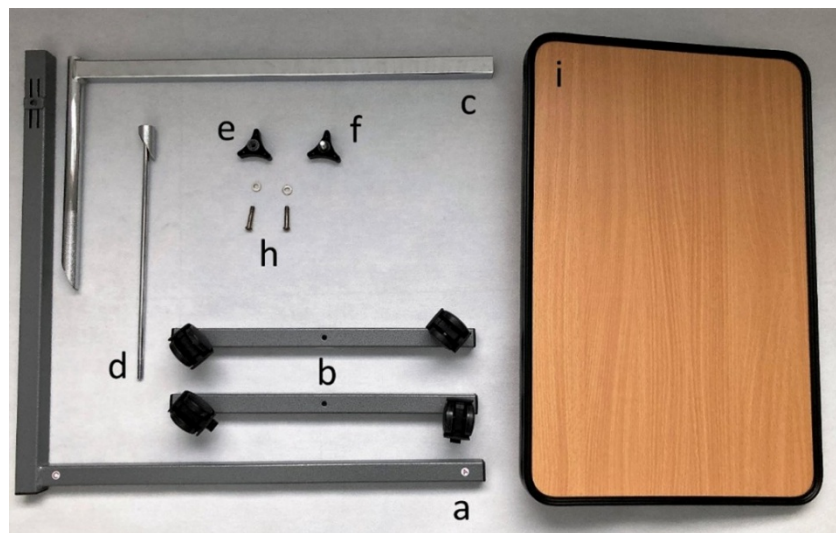

1. Befestigen Sie beide Fußgestelle mit Rollen (b) am Hauptrahmen (a), indem Sie die entsprechenden Buchstabenmarkierungen zuordnen – richten Sie beispielsweise den Buchstaben „A“ am Rahmen am „A“ des Fußgestells aus und verfahren Sie ebenso mit „B“, „C“ und „D“.
2. Stellen Sie den Tisch nach der Montage des Fußgestells aufrecht auf seine vier Rollen und betätigen Sie die Rollenbremsen, um ihn für die weitere Montage zu stabilisieren.
3. Setzen Sie den Tischplattenrahmen (c) in die quadratische Öffnung des Hauptrahmens (a) ein.
4. Setzen Sie den Tischplattenbolzen (d) so in die abgeschrägte Öffnung des Tischplattenrahmens (c) ein, dass die beiden abgeschrägten Flächen bündig aneinanderliegen.
5. Schrauben Sie die Befestigungsflügelmutter (e) auf das vorstehende Gewinde des Tischplattenbolzens (d). Ziehen Sie sie nicht zu fest an; sie muss lediglich so fest sitzen, dass sie nicht abfällt.
6. Legen Sie die Tischplatte (i) auf den vorbereiteten Tischplattenrahmen. Halten Sie zur Erleichterung der Montage das Rohr an der Unterseite der Tischplatte mit einer Hand fest. Ziehen Sie nach dem Auflegen der Tischplatte die Befestigungsflügelmutter (e) fest.
7. Befestigen Sie abschließend die Flügelmutter mit Schraube (f) in der vorgesehenen Öffnung des Hauptrahmens (a) und ziehen Sie sie fest.

EINSTELLEN DER TISCHPLATTENNEIGUNG

- Lösen Sie zum Einstellen des Tischplattenwinkels die seitlich an der Tischplatte befindliche Befestigungsflügelmutter (e).
- Ziehen Sie die Befestigungsflügelmutter (e) nach dem Einstellen des richtigen Winkels fest.

EINSTELLEN DER TISCHPLATTENHÖHE

- Lösen Sie zum Einstellen der Tischplattenhöhe die Flügelmutter mit Schraube (f) am Grundrahmen (a).
- Ziehen Sie die Flügelmutter mit Schraube (f) nach dem Einstellen der richtigen Höhe fest.

BREMSSEN

- Arretieren Sie die Rollenbremsen während der Benutzung des Tisches.

4. Technische Daten

Abmessungen	60,5 x 40,2 cm
Abmessungen der Tischplatte	60 x 40 cm
Neigungsverstellung der Tischplatte	0° - 90°
Höhenverstellung	72-112 cm
Gewicht	6,7 kg
Maximale Belastbarkeit	10 kg
Rollendurchmesser	1,50"

5. Hinweise

Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für eine unsachgemäße Verwendung des Produkts, die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften oder einen zweckwidrigen Gebrauch.

6. Wartung

Das Produkt ist mit einem feuchten Tuch zu reinigen und anschließend gründlich abzutrocknen.

n. Scheuernde Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden, da sie die Schutzbeschichtungen beschädigen können. Verunreinigungen sind regelmäßig von den beweglichen Teilen des Produkts (z. B. Scharnieren, Klemmschrauben und Verriegelungsmechanismen) zu entfernen.

7. Lagerungs- und Transportbedingungen

Das Produkt darf nicht direkter Sonneneinstrahlung, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der auf unserer Website verfügbaren Garantiekarte beschrieben sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Beachten Sie, dass für Garantieansprüche der Kaufbeleg (Kassenbono oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Vorkommnisse mit dem Medizinprodukt

Jedes schwerwiegende Vorkommnis im Zusammenhang mit einem Medizinprodukt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des

Mitgliedstaats der Europäischen Union gemeldet werden, in dem der Benutzer oder Patient ansässig ist.

10. Kennzeichnungen

	Katalognummer		Hersteller
	Chargennummer		UDI-Code
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Achtung		Gebrauchsanweisung beachten
	Das Produkt erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der Europäischen Union für Medizinprodukte (MDR 2017/745).		

Unser vollständiges Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich. Weitere Informationen unter: www.timago.com. Vielen Dank, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



08/2026 (I)